


95\*180mm

### Duș bucal inteligent PM-41 (L-15) Manual produs

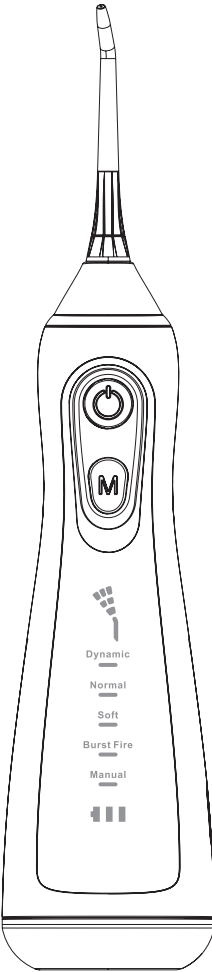

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual al produsului și să-l păstrați pentru consultare ulterioară.

### Instrucțiuni de siguranță

#### Pericol

- Dacă nu înțelegeți procedurile de operare și instrucțiunile de siguranță, vă rugăm să nu utilizați acest produs pentru a evita rănirea cauzată de o funcționare necorespunzătoare.
- Vă rugăm să nu utilizați produsul prin alte mijloace decât acest manual.
- Nu dezamblați acest produs și nu schimbați componentele acestui produs pentru a evita deteriorarea acestui produs sau electrocutarea, altfel garanția nu mai este valabilă.
- Nu folosiți apă cu o temperatură peste 40°C în rezervorul de apă și curățați gura pentru a evita arsurile.
- Dacă dușul bucal cade în apă în timpul încălzirii, vă rugăm să deconectați ștecherul înainte de a scoate produsul.
- Dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, înlocuiți adaptorul de alimentare înainte de utilizare.
- Nu puneți produsul pe foc sau pe căldură și nu încărcați, folosiți sau așezați la temperaturi ridicate.

#### Avertizare

- Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât curățarea bucală.
- Nu apăsați ferm duza pe gingii sau dinți pentru a evita deteriorarea gingiilor.
- Vă rugăm să puneți acest produs într-un loc sigur pentru a evita căderea sau căderea în apă.
- Nu scufundați acest produs în apă pentru a evita defecțiunile sau pentru a provoca incendiu, electrocutare, explozie și alte pericole.
- Nu conectați sau deconectați ștecherul de alimentare și ștecherul de încărcare cu mâinile ude.
- Înainte de a conecta ștecherul, vă rugăm să verificați dacă tensiunea marcată de adaptorul de alimentare este în conformitate cu tensiunea locală.
- Nu deteriorați sau modificați cablul de alimentare, nu întindeți, îndoiiți sau răsușiți cablul de alimentare cu forță și nici nu puteți plasa obiecte grele pe cablul de alimentare sau blocați cablul de alimentare între obiecte.
- Nu așezați produsul, în special cablul de alimentare, lângă obiecte fierbinți.

#### Atenție

- Deconectați ștecherul de alimentare și ștecherul de încărcare înainte de întreținere.
- Nu așezați produsul la temperaturi ridicate sau umiditate și evitați lumina directă a soarelui.
- Nu încărcați acest produs în locuri fierbinți sau umede, cum ar fi băi și toalete.
- Dacă nu este utilizat o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați ștecherul de alimentare și ștecherul de încărcare pentru a evita incendiul sau pericolul.
- Acest produs nu are piese înlocuibile sau reparabile. Dacă aveți nevoie de reparații, vă rugăm să-l returnați producătorului.
- Nu utilizați dacă nu există duză.
- Unele ape de gură pot coroda acest produs, vă rugăm să nu utilizați apă de gură în acest produs.
- Acest produs nu este potrivit pentru copii, sugari și utilizatori care nu îl pot folosi decât dacă sunt supravegheați sau instruiți de persoana responsabilă cu siguranța în utilizarea acestui produs. Vă rugăm să nu-l lăsați la îndemâna copiilor și a bebelușilor. Nu-l utilizați ca jucărie.
- Pacienții cu boală parodontală sau cei care au suferit o intervenție chirurgicală orală în ultimele 2 luni trebuie să consulte un medic înainte de utilizare.
- Când conectați sau deconectați sursa de alimentare, asigurați-vă că țineți ștecherul în loc de cablul de alimentare.

### Prezentare structură

Duză de pulverizare

ON / OFF

Selectarea modului

Indicator status funcționare

Indicator mod dinamic

Indicator mod normal

Indicator mod burst fire


Indicator mod manual

Indicator curent rămas

Conductă de aspirație

Rezervor de apă

Cablul de încărcare TIP-C

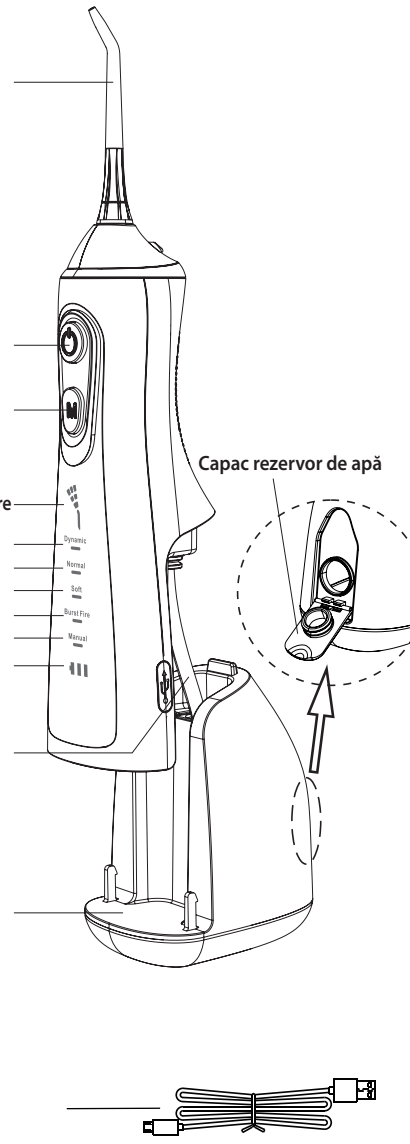

### Prezentare utilizare

#### Înainte de utilizare, vă rugăm să încărcați produsul după cum urmează:

1. Verificați pentru a vă asigura că produsul și mâinile sunt uscate, apoi conectați mufa USB la adaptorul de 5 V (adaptorul este pregătit de utilizator și conectați-l la priză (Figura 1).
2. Scoateți capacul de încărcare, introduceți celălalt capăt al cablului USB în mufa de încărcare a perforatorului, vă rugăm să acordați atenție mufei de încărcare și asigurați-vă că este introdusă în poziția corectă (Figura 2).

#### Sfaturi prietenoase:

- Dacă simbolul cantității electrice este gol în timpul sau după utilizare, înseamnă că cantitatea electrică este insuficientă și trebuie încărcată. Este nevoie de 4-5 ore pentru a se încărca complet.
- La încărcare, simbolul cantității electrice indică cantitatea electrică.
- Simbolul de alimentare este plin și nu mai pălpaie, înseamnă că este complet încărcat.

#### Când utilizați, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Introduceți duza în orificiul din partea de sus a mânerului (Figura 3-1). Dacă trebuie să înlocuiți duza, mai întâi opriți și apoi apăsați ușor butonul de eliberare a duzei pentru a înlocui cu ușurință duza (Figura 3-2).
2. Umpleți rezervorul de apă cu apă. Există două metode de umplere cu apă, după cum urmează:
  - a. Deschideți capacul rezervorului de apă, țineți dușul bucal orizontal, puneți apă în rezervorul de apă și apoi închideți capacul. (Figura 4).
  - b. Trageți în jos recipientul de apă, luați rezervorul de apă, țineți rezervorul de apă vertical, injectați apă în rezervorul de apă și

împingeți în sus în timpul instalării (Figura 5).

3. Selectați modul dorit apăsând butonul de mod. De asemenea, puteți comuta la modul dorit apăsând butonul de mod în timpul utilizării.

Acest produs are cinci moduri: dinamic, normal, lin, burst fire și mod manual. Funcțiile specifice sunt următoarele:

**Modul dinamic:** În primele 3 secunde, se schimbă de la slab la puternic, cu forță puternică, ceea ce nu este potrivit pentru începători;

**Modul normal:** În primele 3 secunde, se schimbă de la slab la puternic, iar presiunea standard a apei îndeplinește cerințele zilnice de curățare;

**Modul lin:** presiune ușoară a apei, potrivit pentru persoanele cu dinți sensibili;

**Modul burst fire:** injectare punct la punct, în special pentru utilizatorii ortodonți;

**Modul manual:** în funcție de condițiile personale, este potrivit pentru persoanele cu nevoi speciale.





#### Sfaturi:

Experții stomatologici recomandă ca primul utilizator să folosească modul lin timp de 1 săptămână, iar apoi să folosească alte moduri după adaptare.

4. Înainte de utilizare, trebuie să țineți dușul bucal pe verticală, duza se extinde în cavitate, alinază dinții sau gingiile, iar gura se deschide ușor, astfel încât apa să poată curge fără probleme (Figura 6-1 & 2).

5. Apăsați butonul comutator pentru a utiliza. Când utilizați, vă rugăm să acordați atenție următoarelor puncte: (Figura 7)

- a. Direcția curgerii apei este perpendiculară pe dinți sau gingii;
- b. Deplasați-vă încet de-a lungul dinților și curățați dinții în ordine;

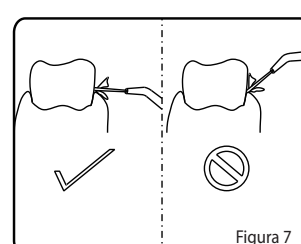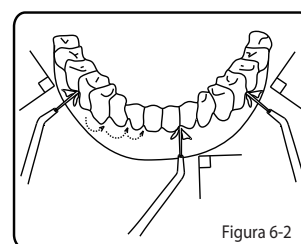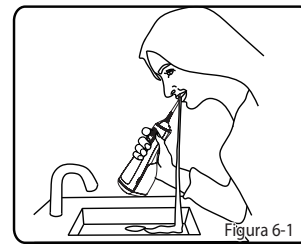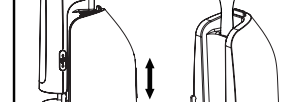

c. Duza este aliniată cu linia gingiei și perpendiculară pe gingie.

#### Sfaturi:

Nu pulverizați apă direct de-a lungul buzurului parodontal. După utilizare, apăsați butonul comutator pentru a opri. Acest produs are o funcție de cronometru de 2 minute. Se va opri automat după 2 minute. Dacă trebuie să continuați să îl utilizați, vă rugăm să apăsați butonul de comutare.

#### După utilizare, urmați pașii de mai jos:

1. Deschideți capacul rezervorului de apă și turnați apa (Figura 8).
2. Apăsați butonul comutator pentru a spăla dinții și a goli automat apa acumulată (Figura 9).
3. Apăsați butonul comutator pentru a opri dispozitivul de duș bucal și apoi închideți capacul rezervorului de apă.
4. Uscați dușul bucal de apă cu o cârpă (Figura 10).

**Sfaturi:** Pentru a evita răspândirea bacteriilor, vă rugăm să vă asigurați că nu există apă reziduală în dușul bucal. Dacă intenționați să nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, vă rugăm să curățați produsul și să-l păstrați după uscare.

### Întreținere de rutină




Vă rugăm să utilizați apă curată sau detergent neutru pentru a curăța produsul, nu folosiți detergent coroziv sau abraziv, deoarece acestea vor deteriora produsul. Nu spălați cu apă fierbinte peste 50°C.

#### Curățarea carcasei:

- Vă rugăm să curățați carcasa cu o cârpă uscată sau o cârpă umedă.
- Nu scufundați carcasa în apă pentru curățare.

#### Curățarea rezervorului de apă:

- Poate fi curățată cu o cârpă uscată sau umedă sau îndepărtat și clătit cu apă curată.

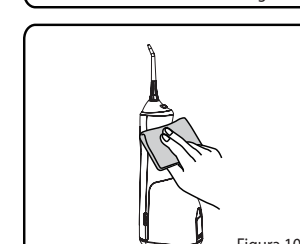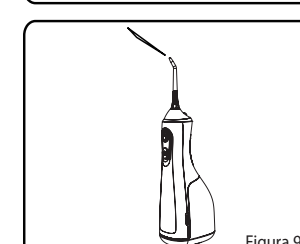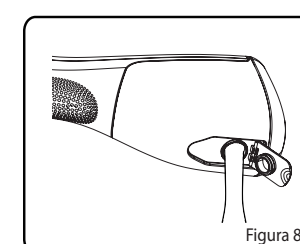

- Dacă intenționați să nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, vă rugăm să curățați apa din interior.

#### Curățarea duzei:

- Poate fi curățată cu o cârpă uscată sau o cârpă umedă sau scoasă și clătită cu apă curată, apoi stearsă cu o cârpă.
- Nu îndoiiți, trageți sau răsușiți furtunul duzei.
- Experții stomatologici recomandă înlocuirea duzei la fiecare 6 luni

### Depanare

Probleme	Cauze posibile	Soluție
Nu mai funcționează	O nouă achiziție sau o perioadă lungă de timp fără încărcare duce la descărcarea bateriei	Vă rugăm să încărcați mai mult de 3 ore
Presiune scăzută a apei în timpul utilizării sau fără pulverizare de apă	Este ceva blocat în duză	Înlocuiți duza
	Orificiul de aspirație este blocat	Curățați orificiul de aspirație
Funcționează doar pentru scurt timp după încărcare	A stat inactiv de ceva vreme	Trageți duza pentru a spăla orificiul duzei de pe unitatea principală
	Bateria a ajuns la sfârșitul duratei de viață utilă	Când rezervorul este plin cu apă, ridicați-l orizontal și porniți-l
Indicatorul de încărcare nu se aprinde în timpul încălzirii	Conectorul de alimentare nu este conectat corect	Vă rugăm să conectați distribuitorul
	Circuitul de încărcare a produsului este defect	Vă rugăm să contactați distribuitorul

### Eliminarea deșeurilor

Acest produs folosește baterii reîncărcabile. La sfârșitul duratei de viață a produsului, înainte de a arunca produsul, asigurați-vă că ați scos bateria și ați reciclat-o sau aruncați-o în conformitate cu reglementările locale de gestionare a deșeurilor. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să consultați departamentul local de gestionare a deșeurilor.

### Duze pentru acest duș bucal:



**Duza cu jet standard**  
Curățare profundă între dinți



**Duza ortodontică**  
Curățarea aparatelor dentare, fatetelor, punților și coroanelor dentare



**Duza placă dentară**  
Curățarea aparatelor dentare, fatetelor, punților și coroanelor dentare



**Duza limbă**  
Curățare eficientă învelișului limbii și menținere a cavității bucală curată

Importator și Distribuitor:  
sc PERFECT MEDICAL s.r.l.  
Loc. Sîntion nr. 684 jud. Bihor România  
Tel./Fax: 0040 359 461 311  
E-mail: perfectmedical@yahoo.com  
www.perfectmedical.ro